

Manual de Instrucciones Básicas en Español para utilizar el Equipo de Comunicación Blue Bird



© 2008 PRATP

El contenido de este folleto fue subvencionado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos (DEEU) bajo la Propuesta Núm. H224A070051B. Sin embargo, este documento no necesariamente representa la política del DEEU, por lo que no debe inferirse que consta con el endoso oficial del Gobierno Federal.

Diseño de: Gretchen M. Matías Lebrón
Preparado por: Tamara Negrón Vélez
Edición de: Vivian Pérez Padilla
Revisado en Mayo/2008

Equipo de Comunicación Blue Bird

1. ¿Para qué se utiliza este equipo de comunicación?

El *Blue Bird* está diseñado como un equipo de comunicación alternativa para ser utilizado por personas cuya habilidad de comunicación verbal está afectada.

2. ¿A quiénes va dirigido este equipo?

El equipo puede ser utilizado por cualquier tipo de persona, niño o adulto, que presente un problema de comunicación y cuente con las destrezas motoras para accederlo directamente o a través de un interruptor.

3. ¿Cómo funciona?

El comunicador está dividido en 11 niveles. Uno de sus niveles está diseñado para el control de equipos que funcionen a través de un interruptor, mientras que los otros 10 son programables como páginas de comunicación. Cada una de las páginas se puede programar con hasta 24 mensajes grabados en voz digital.

El comunicador también cuenta dos métodos alternos de acceso. El primer método es a través de uno o dos interruptores; el segundo, a través del uso de rastreo auditivo. La función de rastreo auditivo se utiliza conectando al equipo unos audífonos que dictan el mensaje al usuario, para que éste pueda seleccionarlo y luego amplificarlo mediante las bocinas del equipo.

Características del Equipo:

- Tarjeta de memoria de 256 MB
- Capacidad para grabar 242 mensajes de 1 minuto cada uno
- Entradas de acceso por interruptor 4
- Salida de acceso para juguetes o equipos por interruptor 2
- Funciona con baterías recargables

4. ¿Cómo puede este programa ayudarlo(a)?

Si tiene la necesidad de:	Este equipo puede ayudar de la siguiente manera:
<ul style="list-style-type: none">• Navegar entre páginas.•	<ul style="list-style-type: none">• El <i>Blue Bird</i> le permite navegar entre diez páginas, cada una con capacidad para almacenar 24 mensajes de voz de aproximadamente un minuto de duración. El equipo presenta la ventaja de un comunicador dinámico sin la complejidad de los símbolos de navegación.

Si tiene la necesidad de:	Este equipo puede ayudar de la siguiente manera:
<ul style="list-style-type: none"> • Encender un juguete o un equipo que funcione con un interruptor. • Uso de interruptores o rastreo auditivo para acceso. 	<ul style="list-style-type: none"> • El comunicador le permite encender dos equipos que funcionen con interruptor desde una de las páginas de comunicación. Los mensajes en el equipo se pueden acceder a través de un interruptor o con la función de rastreo auditivo. El equipo tiene entrada para cuatro interruptores.

Ventajas al utilizar *Blue Bird*:

- El equipo permite más de una alternativa de acceso.
- A través del comunicador se pueden encender equipos que funcionen con interruptor.
- Presenta la versatilidad de un equipo dinámico, ya que permite navegar entre páginas.

Comandos básicos:

1. Encender el equipo

- Apriete el botón que se encuentra en la parte superior del equipo.




2. Grabar un mensaje

- Seleccione la página en la que desea grabar el mensaje e indique el número de la página en el botón correspondiente.



- En la parte posterior del equipo, localice el botón de grabar y muévelo a la posición identificada con la palabra **REC**. En la parte delantera del equipo, en el dibujo identificado con un micrófono, se encenderá una luz roja, lo que le indica que el equipo está listo para grabar.

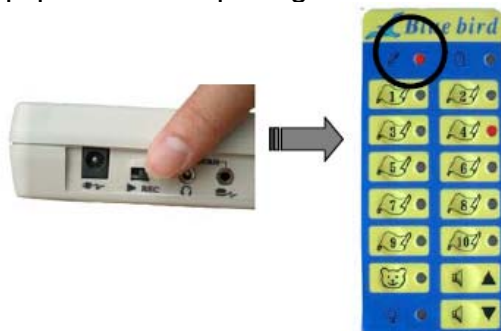

- Seleccione el símbolo en el cual quiere grabar el mensaje, déjelo apretado, y dicte el mensaje al micrófono. Repita el mismo procedimiento hasta que termine de grabar todos los mensajes.



- Una vez termine de grabar los mensajes, localice nuevamente el botón de grabación y muévelo hacia el símbolo identificado con una flecha. Una vez termine el procedimiento, la luz de grabación se apagará y podrá comenzar a utilizar el equipo. Toque el símbolo deseado para escuchar los mensajes grabados.



3. Encender equipos que funcionen con interruptor a través del comunicador:

- En la parte posterior del equipo, identificado con un osito, están ubicadas las dos entradas para los interruptores.



- Estas entradas son controladas con la página del comunicador identificada con un /L/ y una /R/.



- Para utilizarlo conecte el equipo a una de las entradas, grabe un mensaje en la celda correspondiente (siguiendo los pasos para grabar mensajes) e identifíquelo con el estímulo de su predilección para que la persona pueda identificarlo fácilmente. Cuando el equipo esté en uso, se encenderá una luz roja al lado del botón identificado con un osito.

Nota: Para conectar el juguete o equipo al comunicador necesitará un cable que vaya del comunicador al equipo. El cable no viene incluido con el comunicador, pero se puede comprar en tiendas de electrónicos como Radio Shack.



Para información adicional:

Distribuidores en PR:

- *KTG Inc.*
150 Calle #1, Cupey Industrial Park, San Juan, PR 00926
Teléfono: (787) 760-7610 / Fax: (787) 760-1590
E-mail: ktoro@ktginc.com

Distribuidor USA:

- *Saltillo Corporation*
2143 Township Road #112, Millersburg, OH 44654 USA
Toll Free: 1-800-382-8622
Phone: (330) 674-6722
Fax: (330) 674-6726
Internet: <http://www.saltillo.com/>